




Stinkskabe

El installationer | Belysning | Trompetstruds

El-installationer

EL

Stikkontakter er som standard placeret i betjeningspanelet. Der benyttes IP44 som standard.

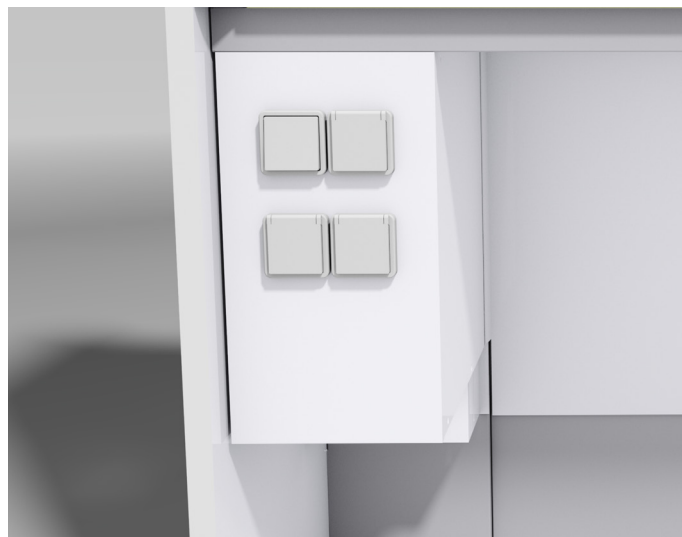


STANDARD




Enkelt stik




Dobbelt stik

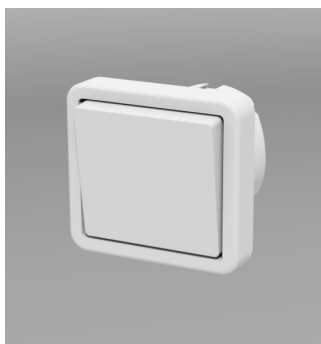

Enkelt kontakt

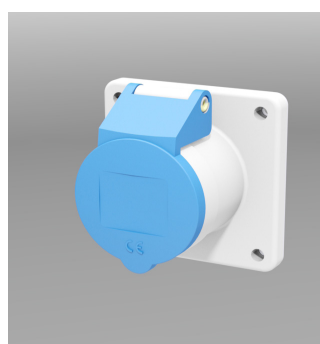


CEE 230V

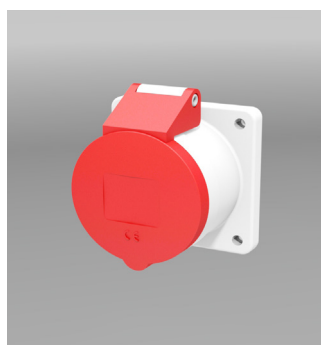


CEE 400 V


OPTION

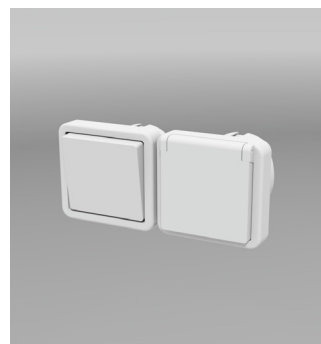


1 stik og kontakt

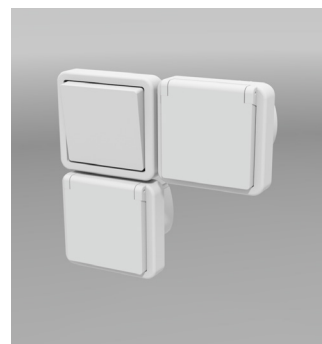


2 stik og kontakt

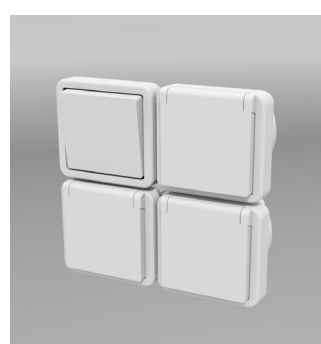

3 stik og kontakt

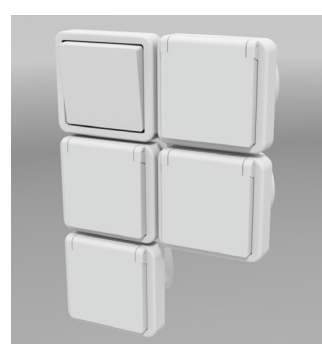

4 stik og kontakt

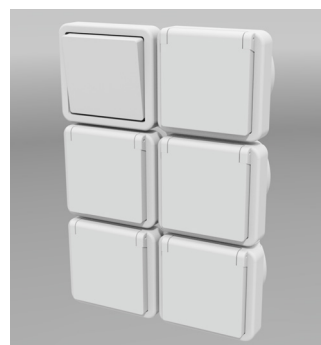

5 stik og kontakt

Installationer

BELYSNING


LED belysningen er placeret i stinkskabets top. Lyset reflekteres i opal glas, som er placeret direkte under LED lyset.

De to alu-profiler som LED belysningen er placeret i, er vinklet for optimal udnyttelse af lyskilden, uden at blændingstallet (UGR) påvirkes, grundet en yderligere opal glasplade. Lyset kan tilgås fra stinkskabets både kabine og bag dækplader ved service.


- 4000 K
- Lysstyrke: Minimum 1800 lm pr. meter (lysstyrke ~ 1600 lm svarer til en 100W pære)
- Minimum <RA90
- 22 W pr meter
- 40V AC/24 VAC styreboks

LED sikrer et ensartet lys i hele printets længde. LED belysningens levetid er afhængig af muligheden for varmebortskaffelse af diodernes egenproducerede energi.

Labflex benytter et princip, hvor hele LED belysningen er fastgjort på et varmebortledende underlag, dette giver en markant længere levetid, sammenlignet med brug af klæbende opsætning, som reagerer med varmen over tid.

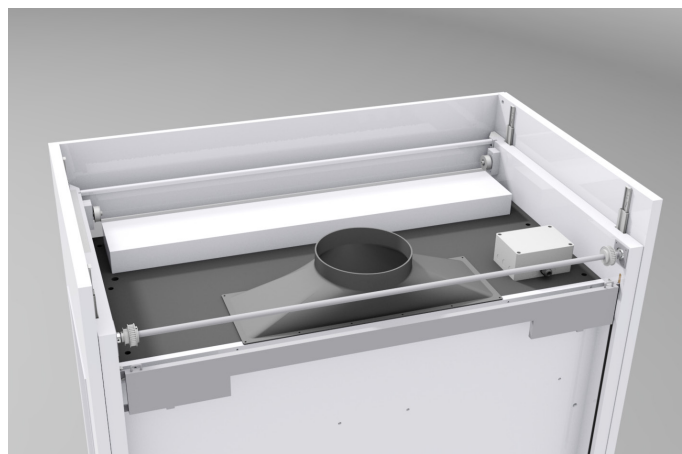

Placering af lysarmatur

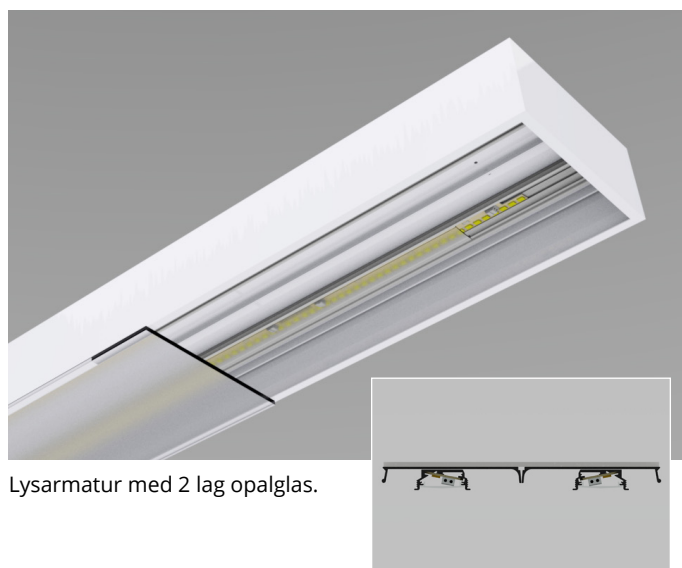

Lysarmatur med 2 lag opalglas.

Trompetstuds


Trompetstudsens form er designet med en blød overgang fra stinkskabskabinens top til ventilationsrørføringen. Denne bløde overgang minimerer støj og sikre optimal luftskifte, da luftens flow forbliver uafbrudt.

Der vælges studs iht. den type stinkskab der er valgt.

Trompetstuds, Ø250 mm, polypropylene (PP) (for 900, 1200, 1500 og 2400 mm stinkskab).


Trompetstuds, Ø315 mm, stål (for 1800 mm stinkskab).

STANDARD

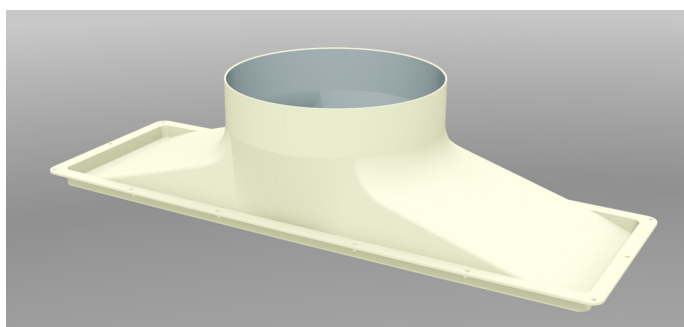

Polypropylene (PP)

OPTION

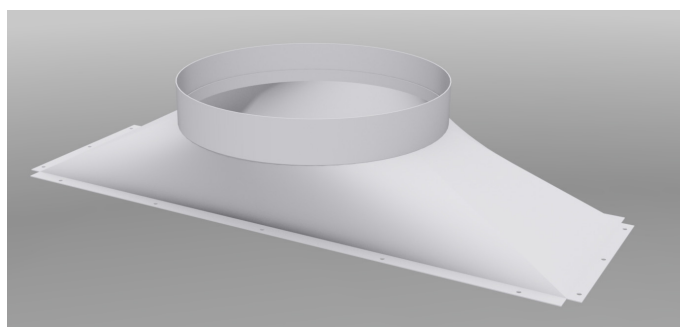

Stål

labflex.dk

Labflex er en af Europas største leverandører af innovative og kundetilpassede inventarløsninger til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren. I samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører skabes fremtidssikrede laboratorier – fra procesopstart til levering af færdig indretning. For yderligere information: www.labflex.dk

HOVEDKONTOR

Labflex A/S
Marielundvej 45 A
DK - 2730 Herlev

T +45 8747 2700

DANMARK

Labflex A/S
Hjortevej 3
DK - 7800 Skive

T +45 8747 2700

ENGLAND

Labflex Limited
Pegasus Business Park
Castle Donington
UK - DE74 2TZ

T +44 (0) 1332 638 071